

medartis®

PRECISION IN FIXATION

PRODUKTINFORMATION

# All-in-One Klammer



APTUS®  
Foot



Ready. Steady. Staple.  
The Swiss Pocket Staple.


# Ready. Steady. Staple.

Das sterile Klammer-Kit im Taschenformat mit Implantat und allen implantatspezifischen Instrumenten in einer kleinen und leichten Verpackung von 19 g und 66 x 99 x 11 mm.

Ein weiterer Schritt hin zu umfassender Hallux-Behandlung und Osteosynthese am Fuss.


## Die Klammer im Taschenformat

- Komplet
- Funktionell
- Steril und kompakt im Regal

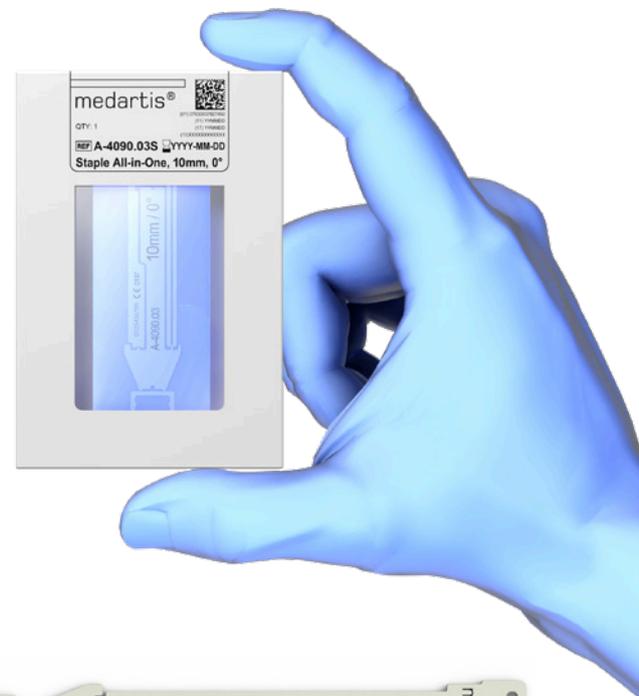

## Implantat und Instrumente

- Mit Präzisionslaser aus rostfreiem Stahl geschnitten
- Implantat und Instrumente lassen sich leicht voneinander lösen
- Verschiedene Klammerdesigns, um anatomischen Anforderungen und chirurgischen Präferenzen gerecht zu werden
- Schweizer Engineering und Herstellung

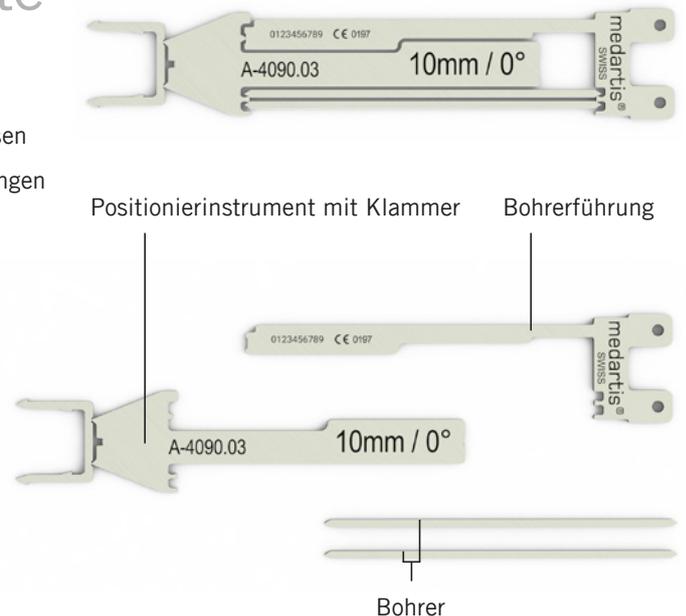

# Spezifikationen

- In zwei Breiten (8 mm und 10 mm) und zwei Winkeln (0° und 26°) verfügbar
- Schenkellänge 10 mm
- Widerhaken an den Schenkeln können einem Auswandern der Klammer vorbeugen
- Klammerdesign und Bohrerführung ermöglichen Kompression
- Zwei Bohrer und die passende Bohrerführung sind integriert
- Positionierinstrument für präzises Einbringen



# Nutzen

- Kein Wiederaufbereitungsaufwand
- Schlankes Material- und Beschaffungsmanagement – 1 Artikel, 1 Preis
- Keine zusätzlichen Kosten für Verbrauchsartikel wie z.B. K-Drähte zum Bohren
- Verringerung von OP-Leerzeiten

# Bestellinformation

Material: Rostfreier Stahl (ASTM F139)  
Klammerdicke: 1.0 mm

## Klammern All-in-One



A-4090.01S



A-4090.03S



A-4090.02S



A-4090.04S

Art. Nr.		Beschreibung (Breite, Winkel)	Stk./Pkg.
A-4090.01S	<b>STERILE</b>	08 mm, 0°	1
A-4090.02S	<b>STERILE</b>	08 mm, 26°	1
A-4090.03S	<b>STERILE</b>	10 mm, 0°	1
A-4090.04S	<b>STERILE</b>	10 mm, 26°	1

Für weitere Informationen zur Produktlinie APTUS Foot siehe [www.medartis.com](http://www.medartis.com).

FOOT\_07000000\_v0 / © 2019-06, Medartis AG, Schweiz. Technische Änderungen vorbehalten.

#### **HERSTELLER & HAUPTSITZ**

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Schweiz  
P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | [www.medartis.com](http://www.medartis.com)

#### **TOCHTERGESELLSCHAFTEN**

Australien | Brasilien | Deutschland | Frankreich | Japan | Mexiko | Neuseeland | Österreich | Polen | UK | USA

Adressen und weitere Informationen bezüglich unserer Tochtergesellschaften und Distributoren siehe [www.medartis.com](http://www.medartis.com)



Haftungsausschluss: Diese Informationen sollen das Medartis Produktangebot von Medizinprodukten aufzeigen. Der Chirurg muss sich stets auf seine eigene fachmedizinische Einschätzung stützen, um über den Einsatz eines bestimmten Produkts bei der Behandlung des jeweiligen Patienten zu entscheiden. Medartis erteilt keinen ärztlichen Rat. Die Produkte sind möglicherweise aus Registrierungsgründen und/oder wegen medizinischer Verfahren nicht in allen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Medartis Vertreter ([www.medartis.com](http://www.medartis.com)). Diese Informationen enthalten Produkte mit der CE-Kennzeichnung. Nur für USA: Gemäss Bundesgesetz darf die Abgabe dieses Produkts nur an Ärzte oder in deren Auftrag erfolgen.